


Power Floss®

DENTAL WATER JET

- A: Nádržka
- B: Maximálna úroveň naplnenia
- C: Trubicica
- D: Tlačidlo
- E: Teleso čerpadla
- F: Tryska

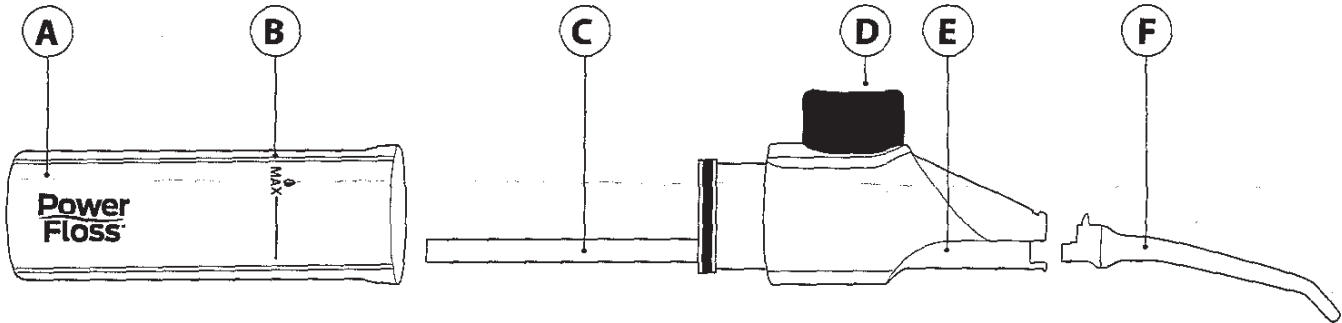

Pripravte si Power Floss® Dental Water Jet

Dôležité: Pred použitím Power Floss® Dental Water Jet, odpojte nádržku a ponorte teleso čerpadla, trubicu a trysku úplne do vody. Stlačte tlačidlo aspoň na 60 sekúnd, kým začína bublať. Potom zdvihnite koniec trysky nad vodou a stlačte tlačidlo, aby ste sa uistili, že jednotka funguje správne a má stabilný prúd vody.

Plnenie dentálneho vodného prúdu Power Floss®


1. Držte dentálnu vodnú trysku Power Floss® vzpriamene, jemne otočte počítadlo zásobníka -v smere hodinových ručičiek a oddelene od telesa čerpadla.
2. Naplňte nádržku po rysku maximálneho naplnenia alebo pod ňu buď vodou alebo ústnu vodu podľa vášho výberu.
Poznámka: Používajte len ústnu vodu s rovnakou konzistenciou ako voda.
3. Znova pripojte teleso čerpadla vložением do zásobníka a jemným otočením v smere hodinových ručičiek zaistíte na mieste.

Používanie Power Floss®

1. Umiestnite svoj palec, ako je znázornené na obr.1 (pozri vyššie), na tlačidlo.
2. Počas používania držte Power Floss® vo vzpriamenej polohe, aby ste zabezpečili stály prúd vody.
3. Stlačte tlačidlo niekoľkokrát, kým tekutina netečie v stálom prúde. Rýchlosť a objem prúdu môžete upraviť zmenou sily, ktorú aplikujete na tlačidlo. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov experimentujte s použitím rôzneho tlaku a uhlu Power Floss® pri pohybe v ústach.

Obr. 1

! Pri používaní Power Floss® nenakláňajte cez horizontálnu líniu, voda bude vytekať zo štrbín pod nádržkou.

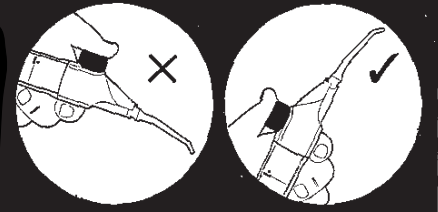

4. Na čistenie medzizubných priestorov umiestnite trysku proti zubom pri línií ďasien, zatvorte ústa okolo trysky a stlačte tlačidlo. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte na prednú aj zadnú časť zubov a pokračujte tak dlho ako potrebujete.
5. Na čistenie mostíkov, strojčekov, implantátov a iných objektov umiestnite trysku pod mostík alebo objekt a stlačte tlačidlo. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov aplikujte na každé miesto z viac ako jedného uhla, kedykoľvek je to možné.

Starostlivosť o váš Power Floss®

1. Po každom použití vyprázdňte nádržku a stlačením tlačidla odstráňte zvyšnú tekutinu z jednotky.
2. Z hygienických dôvodov nezdieľajte svoj Power Floss® s inými ľuďmi
3. Uložte si Power Floss® Dental Water Jet na bezpečnom mieste a zaistite, aby nedošlo k poškodeniu dýzy.
4. Pri cestovaní uschovajte Power Floss® trysku v zásobníku.

Čistenie Power Floss®

Po použití vyprázdňte nádržku a stlačte tlačidlo, čím odstránite všetky zvyšky tekutiny zvnútra jednotky. Dôkladne opláchnite Power Floss® teplou vodou a utrite dosucha.