

ULTRAZVUKOVÝ MASÁŽER 2V1

Model: AG492



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Ďakujeme, že ste si zakúpili ultrazvukový masážny a fototerapeutický prístroj. Pred použitím produktu si prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

1. Základné informácie

Ultrazvukový masér s funkciou svetelnej terapie 2 v 1 - ak chcete spevniť pokožku, zlepšiť jej farbu a účinne bojovať proti vráskam, tento prístroj je určený pre vás.

Vlastnosti produktu:

- Ultrazvukový masér s funkciou fototerapie podporuje boj proti nedokonalosti pleti – vrátane vrások, jaziev, zmeny farby. • Vyrovnáva tón pleti, zlepšuje krvný obeh, podporuje boj proti akné, vyhladzuje jazvy a vrásky.
- Stimuluje metabolizmus buniek, vďaka čomu sú lepšie okysličené a stimuluje syntézu nové kolagénové vlákna. Stimuluje prirodzený obranný mechanizmus tela.
- Podporuje tvorbu nových kapilár, vďaka čomu je pokožka lepšie prekrvená. Podporuje činnosť lymfatického systému.
- Vtláčanie účinných látok do tkanív v mnohonásobne väčšom množstve ako klasická masáž.
- Má ergonomický tvar, vďaka čomu sa s ním pohodlne pracuje. • Vybavený prehľadným a ľahko použiteľným ovládacím panelom. • ULTRAZVUKOVÉ - umožňujú relaxačný a blahodarný spôsob vstrekovania účinných látok obsiahnutých v kozmetike do pokožky. Teplo vznikajúce pri ošetrení preniká hlboko do tkanív, uvoľňuje pokožku a svaly, hĺbková mikro masáž zlepšuje prietok krvi a lymfy, ako aj metabolizmus a regeneráciu buniek. Ultrazvuková terapia je neinvazívna, bezpečná, šetrná, zvyšuje účinnosť a kvalitu ošetrení a zvyšuje pôsobenie účinných látok obsiahnutých v

kozmetika.

- FOTOTERAPIA -1. **Červené (R) svetlo** : Zvyšuje bunkovú aktivitu na úrovni pokožky. Svetelná stimulácia zvyšuje prietok krvi, pomáha dodávať živiny a rastové faktory do ošetrovaných oblastí. Červené svetlo stimuluje tvorbu fibroblastov a kolagénu v pokožke s vráskami. Otvára lymfatické kanály, vďaka čomu dochádza k lepšiemu odtoku, čím sa uľahčuje odstraňovanie toxických látok a pokožka vyzerá zdravšie.

2. **Zelené svetlo (G)**: Kombinuje účinky červenej a modrej farby, navyše relaxačný účinok, zvyšuje okysličenie lepším krvným obehom. Indikácie: boj s akné, čiernymi bodkami, zosvetľuje zafarbenie po opaľovaní. 3. **Modré svetlo (B)** : Má upokojujúci, protipuchový a protizápalový účinok. Indikácie: akné, rosacea, antibakteriálne a protizápalové.

špecifikácia:

- 2 režimy ultrazvukovej masáže + slabý / silný výkon • Možnosť výberu 1 farby svetla a farebnej kombinácie RGB • Možnosť výberu režimu photoreapy: nepretržité svietenie + 4 režimy blikania • Možnosť súčasného využitia ultrazvukovej masáže a fototerapie • Výkon: 10W • Napájanie: DC - 24V 0,5A • Pulzná frekvencia: 200KHz - 1MHz • Dĺžka kábla: 150cm • Rozmery: 160 x 50 x 58mm


2. Spôsoby prevádzky

Ultrazvuková masáž

Toto ošetrenie účinne odľupuje odumretú epidermu a odhaľuje mladšiu vrstvu pokožky bez odumretých buniek, prebytočného mazu, baktérií a toxických látok, ako aj zvyškov kozmetiky. Takto pripravená pokožka je pripravená lepšie absorbovať prípravky.

Táto funkcia navyše umožňuje vtlčiť kozmetiku hlboko do pokožky, čo výrazne zvyšuje jej účinok. Používajte aktívnu, hydratačnú a tonizačnú kozmetiku vo forme tekutiny alebo gélu. Nepoužívajte kozmetiku vo forme krémov alebo masťnej kozmetiky.

1. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla POWER.

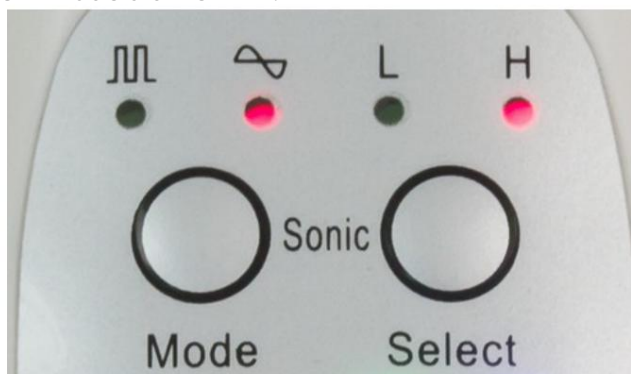

2. Tlačidlom Mode zvolte prevádzkový režim (kontinuálna / pulzujúca masáž). Na masáž pokožky

vyberte nepretržitý režim pre stlačenie kozmetiky vyberte pulzný režim.

3. Pomocou tlačidla Select vyberte intenzitu (L-low, H-high).

4. Naneste na pokožku tekutinu (fyziologický roztok alebo neperlivú minerálnu vodu) alebo vybranú kozmetiku.

5. Zariadenie začne pracovať automaticky. Dotknite sa hlavy pokožky a krúživými pohybmi ju posúvajte po tele.

Pokožka môže mierne sčervenat', čo po niekoľkých minútach zmizne. Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach prevádzky.

Režim fototerapie.

1. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla POWER.



2. Pomocou tlačidla Vybrať vyberte farbu svetla.

3. Tlačidlom Mode zvolte režim svietenia (nepretržité / pulzujúce).

4. Zariadenie začne pracovať automaticky. Dotknite sa hlavy pokožky a krúživými pohybmi ju posúvajte po tele.

5. Režim fototerapie je možné použiť súčasne s režimom ultrazvukovej masáže.

3. Tipy na bezpečné používanie zariadenia a správnu prevádzku.

POZOR!

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE A RIADITE SA TÝMITO POKYNNI. PAMATUJTE, ŽE POSTUPY PORUŠUJÚ VAŠE PRÁVO NA REKLAMÁCIU ZÁRUKY.

- Zariadenie je napájané sieťovým napätím 230V. Akékoľvek poškodenie vodičov Nebezpečný zásah elektrickým prúdom pre používateľa a môže vážne poškodiť zariadenie a spôsobiť požiar.
- Použite 24V napájací zdroj s minimálnym prúdom 0,5A.
- Zariadenie skladujte mimo zdroja vlhkosti na suchom a bezpečnom mieste.
- Ak zariadenie nepoužívate, odpojte ho od zdroja napájania.
- Zariadenie čistite mäkkou suchou handričkou.
- Nepoužívajte zariadenie dlhšie ako 30 minút v jednej relácii.

Použitie ultrazvuku sa absolútne neodporúča v nasledujúcich prípadoch: vysoký krvný tlak, zápal žily, poruchy zrážanlivosti krvi, abnormálny srdcový rytmus kŕčové žily, akútne infekčné a zápalové stavy, cukrovka, duševné choroby, rakovina, aktiv pľúcna tuberkulóza, kardiostimulátor, prítomnosť kovových teliesok v tkanivách (implantáty), tehotenstvo.



Informácia dla užívateľov o pozbyvaní si zariadení elektrických i elektronických (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.